


Bischoff & Bischoff


Mode d'emploi

DH-40/L



Enjoy mobility.

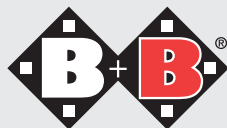

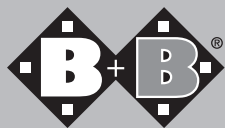

DH-40/L

(Siège de douche)

Chère cliente, cher client,


L'aide pour la douche B+B que vous venez d'acquérir est un produit allemand de grande qualité dont les fonctionnalités professionnelles sont largement reconnues.

Le présent mode d'emploi vous permettra de vous familiariser avec la manipulation de votre aide pour la douche B+B et d'acquérir ainsi toute l'assurance nécessaire à son utilisation.

Nous espérons que notre produit vous apportera une grande satisfaction.

1. Attention - Consignes de sécurité (Analyse des risques conforme à DIN EN ISO 13485)

- Poids maximal autorisé 110 kg
- Réglez les 4 pieds du siège à la même hauteur
- Vérifiez que les boutons d'arrêt sont bien serrés.
- Vérifiez que les vis de fixation de l'assise sont correctement serrées.
- Vérifiez que le dossier est bien fixé.

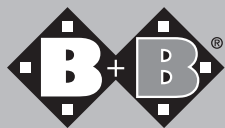

Pied A

Vis de fixation
Vis de maintien
(vis la plus longue)

Vis de fixation

Pied B

Bouton d'arrêt pour réglage de la
hauteur Vis pour poignées

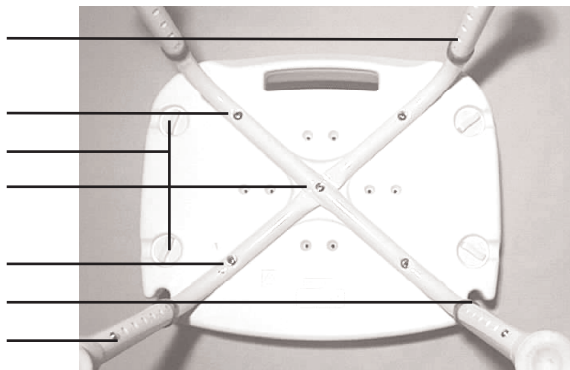


Fig. 1

1. Réglage de la hauteur de l'assise

Les deux pieds sont réglables en hauteur. Appuyez sur les boutons d'arrêt (figure 1) et amenez les pieds extérieurs à la hauteur souhaitée. La hauteur peut être réglée sur 8 positions.



Vérifiez que les boutons d'arrêt sont correctement enclenchés dans l'ouverture!

Placez ensuite les joints en caoutchouc sur les pieds extérieurs.



Les quatre pieds doivent être réglés à la même hauteur!

Le fauteuil de douche est livré avec des patins en caoutchouc antidérapants. Des ventouses sont disponibles sur demande.

2. Montage des pieds A+B

Posez le siège retourné devant vous (figure 1). Croisez les pieds A et B (embouts caoutchoutés dirigés vers le haut, parties planes des pieds bien encastrées l'une dans l'autre) et fixez-les à l'aide d'une vis (vis de maintien avec rondelle et bague de sûreté) au centre du siège. Avec la vis la plus longue, stabilisez le centre du siège de douche.

Orientez à présent les pieds A + B de manière à pouvoir les stabiliser avec les 4 vis restantes (avec rondelles) sur le siège.

Vérifiez que toutes les vis de fixation sont correctement serrées!

3. Montage du dossier (uniquement DH-40 L)

Introduisez (figure 3) le dossier avec la face anatomique à l'intérieur dans le logement prévu jusqu'à enclenchement (figure 2).




La partie inférieure du dossier doit dépasser de 5 mm environ de la partie inférieure du siège!



Fig. 2



Fig. 3

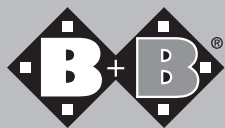

4. Fixation des poignées latérales

Emboîtez les poignées par la partie supérieure du siège dans les échancrures prévues et fixez-les à l'aide des vis (figure 1) par la partie inférieure.



Vérifiez que les vis sont bien serrées.

5. Fixation de la pomme de douche au siège de douche

Les deux échancrures situées à l'extérieur sur l'avant du siège sont conçues pour accueillir la pomme de douche durant la toilette.

6. Nettoyage du siège de douche

Pour le nettoyage du siège de douche, utilisez uniquement des produits doux disponibles dans le commerce.

7. Caractéristiques techniques

Poids maximal autorisé:	110 kg
Largeur d'assise:	50 cm
Hauteur d'assise:	40 - 57 cm (78 - 95,5 cm)
Profondeur d'assise:	40 cm
Poids DH-40 (L):	4,1 kg

Coupon de garantie

(Lisez attentivement nos conditions générales de vente.)

Produit: Siège de douche DH-40/L

Numéro de série:*

(à compléter par le revendeur)

Revendeur:

Date et tampon

* Les références se trouvent sur les côtés du châssis.

B+B France S.A.R.L.

2 rue Hélène Boucher • Parc Ariane - Immeuble Saturne • F-78280 Guyancourt

Tél.: +33 0800/79 90 79 90 • Fax: +33 (0)1 61 38 35 89

www.b-bfrance.fr

contact@b-bfrance.fr

constructeur: Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Görling-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 700/6000 7070 • Fax: +49 700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de

